

Invacare® **Action®³ Junior**



Yes, you can.



Manuel d'utilisation et de réglage



Avant-propos

- Les données communiquées dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Certaines informations sont soumises au droit d'auteur – tous droits réservés – et aucune partie de ce document ne peut être photocopiée ou reproduite sans l'autorisation écrite préalable de Invacare®.
- En tant que premier fabricant européen et mondial de fauteuils roulants, Invacare® propose une large gamme de fauteuils roulants permettant à chacun d'être à l'aise dans toutes les situations de la vie quotidienne. Cependant, le choix final du modèle revient à l'utilisateur lui-même, conseillé par les professionnels de santé ayant les compétences requises.
- L'utilisation correcte et efficace du fauteuil roulant que vous avez choisi dépend de la prescription médicale délivrée en fonction de la nature de votre pathologie ou de votre handicap.

Votre fauteuil est spécialement conçu pour être utilisé en intérieur et de façon limitée à l'extérieur (veillez à bien respecter le code de la route). Il est destiné aux personnes qui ont des difficultés à se déplacer sur de longues distances. Sa résistance permet une utilisation aussi bien sur de courtes durées qu'en continu (personnes assises tout au long de la journée).

Cachet du Distributeur

Introduction

Chère Cliente, Cher Client,

Vous venez d'acquérir un fauteuil de la gamme Invacare® et nous vous remercions de votre confiance.

Ce modèle a été conçu pour vous offrir tous les avantages et caractéristiques afin de satisfaire au mieux vos besoins. En effet, les composants de votre fauteuil ont été sélectionnés en fonction de leur qualité et des contrôles rigoureux ont été effectués tout au long de la fabrication.

Ce guide décrit les limites d'utilisation de votre fauteuil, les opérations d'entretien et les réglages à effectuer par vous-même ou votre entourage.

Toutefois, les réparations, excepté pour les chambres à air, ainsi que certains réglages demandent une formation technique spécifique et doivent donc être réalisés par votre Distributeur.

Bien que votre fauteuil roulant Invacare® ait été conçu pour vous offrir une longue durée de vie en usage continu, il est inévitable que l'usure et son usage au quotidien rende finalement le produit inutilisable.

Invacare® estime que la durée de vie moyenne de ce produit est de cinq ans, s'il a été bien entretenu et utilisé correctement suivant les recommandations du fabricant.

SOMMAIRE

A. GENERALITES

1. Sécurité et limites d'utilisation

1.1. Atteindre un objet depuis son fauteuil	3
1.2. Transfert vers un autre siège	5
1.3. Basculement sur les roues arrière	6
1.4. Basculement, bordures de trottoir	6
1.5. Escaliers	7
1.6. Rampes	7

2. Conseils d'utilisation

2.1. Pliage et dépliage du fauteuil roulant	8
2.2. Propulsion du fauteuil roulant	9
2.3. Soulever le fauteuil	9

3. Contrôle de la sécurité et maintenance

3.1. Contrôle des performances	10
3.2. Contrôle de l'état général	10

4. Transport

4.1. Observations	11
4.2. Méthodes de fixation	12

5. Résumé des conditions de Garantie

Certificat de garantie (à détacher)	14
Visites d'entretien (à faire compléter)	34
	35

6. Résumé des instructions d'utilisation

Page

15

B. DESCRIPTION DE VOTRE FAUTEUIL

1. Présentation

1.1. Introduction	16
1.2. Description générale	16

2. Réglages

2.1. Assise	17
2.1.1 Garnitures de siège	17
2.1.2 Type de dossier	18
2.1.3 Garnitures de dossier	19
2.1.4 Potences repose-pieds	20
2.1.5 Accoudoirs	22
2.2. Châssis	22
2.2.1 Flancs	22
2.2.2 Système de pliage	23
2.2.3 Tubes de direction	23
2.2.4 Kit Stabilizer	23
2.3. Roues arrière	24
2.3.1 Roues	24
2.3.2 Mains courantes	24
2.3.3 Axes	24
2.4. Roues pivotantes	25
2.4.1 Roues	25
2.4.2 Fourches	25
2.5. Freins	26
2.5.1 Freins manuels	26
2.5.2 Freins tambours	26
2.6. Options	27
2.6.1 Options d'assise	27
2.6.2 Options de propulsion	28
2.6.3 Options de sécurité	29
2.6.4 Autre option	30

3. Caractéristiques techniques et outillage

3.1. Caractéristiques techniques du fauteuil standard	31
3.2. Outillage pour les réglages et l'entretien (non fourni)	31
3.3. Caractéristiques dimensionnelles	32

A. GENERALITES

I. Sécurité et limites d'utilisation

Pour que l'utilisation de votre fauteuil soit sécurisante et efficace, les paramètres suivants doivent être respectés :

- Stabilité et équilibre

Votre fauteuil est conçu pour vous apporter toute la stabilité dont vous avez besoin, dans le cadre d'une utilisation quotidienne normale.

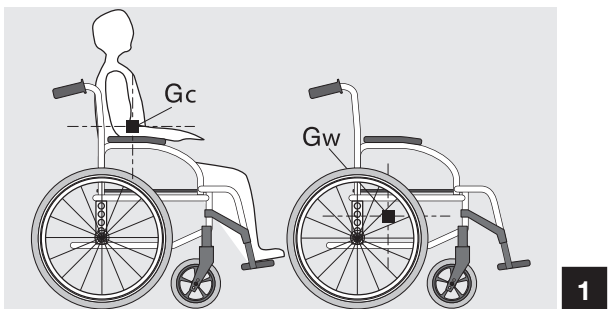
En effet, tout mouvement dans le fauteuil roulant a nécessairement un impact sur la position du centre de gravité, pouvant entraîner la bascule du fauteuil et votre chute.

Pour accroître votre sécurité quand vous bougez beaucoup ou que vous déplacez votre poids d'un point à un autre, nous vous recommandons d'utiliser des sangles de maintien.

- Répartition du poids (figure 1).

L'utilisateur est quotidiennement amené à se pencher, à s'accouder, à bouger sur et en dehors de son fauteuil.

Ces actions modifient l'équilibre normal de votre centre de gravité (Gc) et celui du fauteuil (Gw).



- Poids maximum

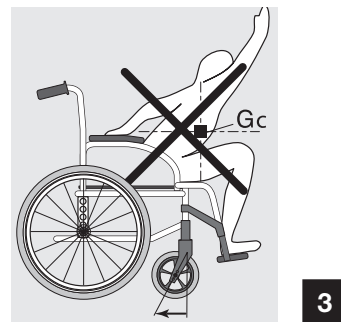
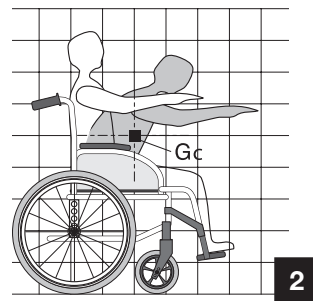
Le poids maximum recommandé de l'utilisateur est de 80 kg. Toutefois, le degré d'activité est un facteur déterminant. Par exemple, un utilisateur actif de 45 kg peut soumettre son fauteuil à une sollicitation supérieure à celle d'un utilisateur de 60 kg. C'est pourquoi nous vous recommandons de faire appel aux conseils de votre revendeur dans le choix du modèle de fauteuil, en fonction de votre mode de vie quotidienne.

I.1. Atteindre un objet depuis son fauteuil

Les limites d'équilibre pour atteindre un objet, représentées sur les figures 2, 3 et 4, ont été déterminées d'après un panel représentatif d'utilisateurs de fauteuils roulants.

- Seuls les bras (figure 2) peuvent être tendus en dehors du siège du fauteuil roulant.


- Le corps et la tête doivent demeurer dans les limites du siège (figure 3).




1.1.1. Inclinaison en avant

Ne penchez pas votre buste au-delà de l'accoudoir (*figure 4*). Pour atteindre un objet en avant, vous devez vous penchez, il faut donc utiliser les roulettes pivotantes comme un outil (en les positionnant en avant) pour maintenir la stabilité et l'équilibre. Un alignement correct des roues est essentiel pour votre sécurité (*figure 5*).

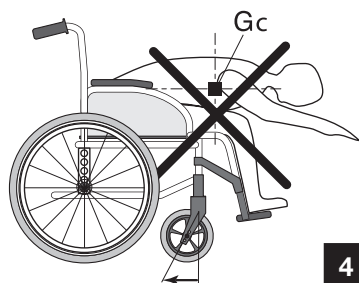
Pour éviter les chutes en avant des enfants actifs lorsqu'ils se déplacent, montent ou descendent en appui sur les palettes et pour améliorer la stabilité générale, un kit "Stabilizer" (élargisseur de voie avant) est disponible en option.




4

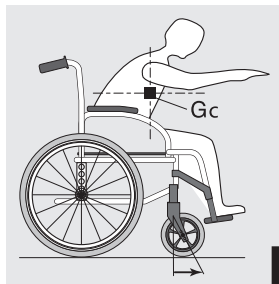

5

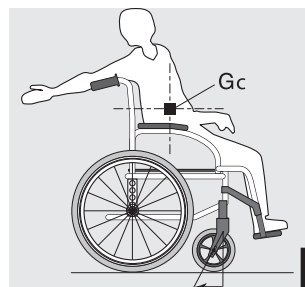

6

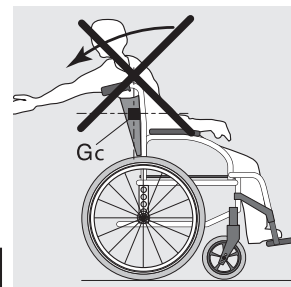

7

1.1.2. Inclinaison en arrière

Placez le fauteuil roulant aussi près que possible de l'objet à atteindre de façon à pouvoir l'attraper simplement en tendant le bras en position assise normale. Surtout, ne vous inclinez pas en arrière car vous risqueriez de faire basculer votre fauteuil (*figures 6 et 7*).

1.2. Transfert vers d'autres sièges

1.2.1 Transfert latéral (figure 8 & 8A)

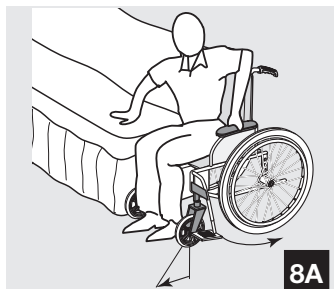
Ce transfert peut se faire sans aide, à condition que vous soyez suffisamment mobile et que votre tonicité musculaire vous le permette.

- Approchez le fauteuil roulant aussi près que possible du siège dans lequel vous souhaitez vous asseoir, roulettes pivotantes positionnées en avant. Verrouillez les freins manuels des roues arrière. Les poignées se replient pour faciliter le transfert. Vous pouvez maintenant déplacer votre corps vers le siège ;

- Pendant le transfert, vous n'aurez pas ou presque pas de soutien au-dessous de vous ; si cela est possible, vous pouvez utiliser une planche de transfert ;

- Si vous êtes capable de vous tenir plus ou moins debout et si la partie supérieure de votre corps est suffisamment robuste et mobile, vous pouvez vous transférer vers l'avant.

Repliez la palette et poussez le repose-pied/repose-jambe sur le côté pour libérer le passage, inclinez votre corps en avant en vous tenant aux deux accoudoirs et soulevez vous en position debout ; déplacez vous ensuite vers l'endroit où



vous souhaitez vous asseoir en répartissant votre poids sur les bras et les mains.

1.2.2 Transfert frontal (figure 9)

Si vous avez la capacité à vous soulever et si votre buste est suffisamment robuste et mobile, vous pourrez vous transférer en avant vers un autre siège. C'est un mouvement difficile qui nécessite un apprentissage, nous vous recommandons l'aide d'une tierce personne pour prévenir une chute éventuelle. Positionnez les roulettes pivotantes en avant pour augmenter la stabilité. Les freins manuels doivent être en position bloqués, ils ne doivent en aucun cas être utilisés comme points d'appuis lors des transferts.

Saisissez fermement la poignée d'accoudoir.

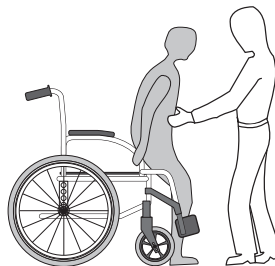
Attention à ne pas accrocher vos ongles sur le bord de la tôle échancrée.

Poussez sur vos bras pour vous soulever facilement. La tierce personne peut alors vous aider à terminer le transfert vers l'endroit où vous souhaitez vous asseoir.



Avertissement :

- Se positionner aussi près que possible de l'endroit où l'on souhaite s'asseoir ;



- Pendant le transfert, bien se positionner au fond du siège pour éviter de casser les vis, d'endommager la garniture du siège ou de faire basculer le fauteuil roulant en avant ;
- Verrouiller les deux freins, ils ne doivent en aucun cas servir d'appuis pour les transferts ;
- Ne jamais se tenir sur les repose-pieds quand on s'assoit ou que l'on quitte le fauteuil (figure 10).

1.3. Basculement (balancement sur les roues arrière)

Pour plus de sécurité, cette manœuvre doit être effectuée par une tierce-personne. Celle-ci devra être consciente de l'effort physique à fournir et devra donc penser à avoir un bon placement afin de soulager son dos (dos droit et genoux fléchis pendant l'effort).

Pour basculer le fauteuil roulant, la tierce-personne doit saisir fermement les poignées en s'assurant qu'elles sont correctement fixées. Elle avertit l'occupant qu'elle va basculer le fauteuil, elle lui demande de se pencher en arrière et elle vérifie que les pieds et les mains de l'occupant ne touchent aucune des roues. Ensuite, la tierce-personne place un pied sur le tube-basculateur et bascule le fauteuil roulant sans à-coups jusqu'à ce qu'elle sente une différence dans la répartition du poids (équilibre qui survient à un angle d'environ 30°).

A ce stade, le fauteuil peut franchir l'obstacle sans difficulté. Enfin, la tierce-personne rabaisse la partie avant lentement et de manière continue jusqu'au sol, en maintenant fermement les poignées.



Avertissement :

- Faire attention aux pièces mobiles comme les accoudoirs ou les repose-jambes : elles ne doivent JAMAIS être utilisées comme des aides lors du levage car elles peuvent se détacher

par inadvertance et blesser l'utilisateur et/ou la tierce-personne.

- Ne pas abaisser brusquement le fauteuil même s'il n'est plus qu'à quelques centimètres du sol car cela pourrait blesser son occupant.

1.4. Basculement, bordures de trottoir

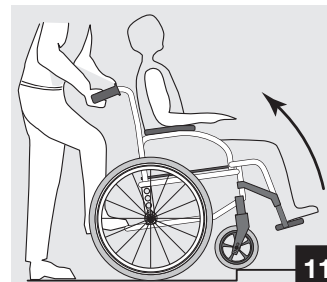
Pour monter un trottoir :

- Méthode 1 (figure 11)


La tierce-personne place le fauteuil roulant face au trottoir, en marche avant. Elle bascule le fauteuil en arrière jusqu'à ce que les roues pivotantes aient franchi le trottoir ; elle pousse alors le fauteuil en avant jusqu'à ce que les roues arrière soient contre la bordure du trottoir et pousse à nouveau le fauteuil en avant jusqu'à ce que les roues arrière montent sur la bordure et la franchissent.

- Méthode 2 (figure 12)

Dans ce cas, la tierce-personne se tient sur le trottoir et place le fauteuil roulant dos au trottoir, roues arrière contre la bordure. Elle bascule le fauteuil en arrière jusqu'au point d'équilibre et tire le fauteuil avec un mouvement régulier



11

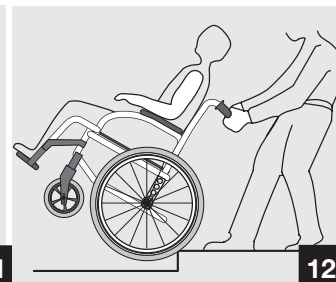

12

jusqu'à ce que les roues arrière aient franchi la bordure ; elle peut ensuite abaisser les roues pivotantes, en veillant bien à ce que le fauteuil soit suffisamment loin sur la bordure pour que les roues pivotantes ne tombent pas dans le vide.

Pour descendre un trottoir :

La tierce-personne place le fauteuil roulant face au trottoir, en marche avant et le fait basculer en arrière jusqu'au point d'équilibre puis elle avance le fauteuil jusqu'à ce que les roues arrière, après avoir épousé l'obstacle, touchent la chaussée ; elle rabaisse alors progressivement les roues pivotantes au sol.

1.5. Escaliers

Cette manoeuvre est délicate, c'est pourquoi nous vous recommandons de l'effectuer avec l'aide de 2 personnes, l'une à l'avant, l'autre à l'arrière.

Pour monter un escalier (figure 13) :

La tierce-personne située à l'arrière bascule le fauteuil en arrière jusqu'à son point d'équilibre, elle maintient ensuite le fauteuil contre la première marche en saisissant fermement

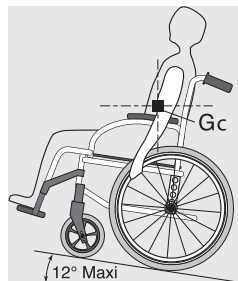


les poignées pour le faire monter.

La tierce-personne située à l'avant tient fermement les montants latéraux du châssis avant et soulève le fauteuil au dessus des marches pendant que l'autre tierce-personne place un pied sur la marche suivante et répète le 1ère opération. Les roues pivotantes du fauteuil ne doivent pas être rabaisées tant que la dernière marche n'a pas été franchie par la tierce-personne située à l'avant du fauteuil.

1.6. Rampes

Il est recommandé de ne pas essayer de s'engager sur des rampes ayant une inclinaison supérieure à 12° pour la version standard et 18° avec le kit "Stabilizer". Au-delà de cette limite, le fauteuil risque en effet de se renverser en cas de rotation ou de déplacement latéral (figure 14).



Rampes ascendantes (figure 15) :

Inclinez votre buste vers l'avant et actionnez vos mains courantes par des poussées rapides afin de maintenir une vitesse suffisante et de contrôler la direction. Si vous souhaitez vous arrêter en cours de route pour vous reposer, engagez simultanément les 2 freins à l'arrêt.

Rampes descendantes (figure 16) :

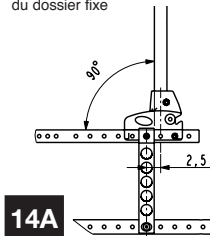
Inclinez votre buste vers l'arrière et laissez les mains courantes glisser dans vos mains tout en veillant à contrôler à tout moment la vitesse et la direction (Standard : 16° et Kit Stabilizer : 23,5°).

Avertissement :


La position de l'axe de la roue arrière et l'angulation de votre dossier inclinable sont 2 paramètres importants qui peuvent affecter votre stabilité lorsque vous êtes assis dans votre fauteuil (voir schéma 14A).

- Eviter de tourner brusquement dans une pente supérieure à 12° et ne jamais essayer de monter ou de descendre une rampe en diagonale (figure 17).


Configuration standard
du dossier fixe



14A

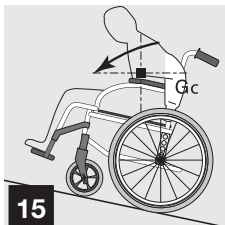

15

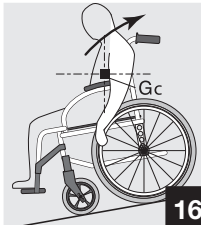

16

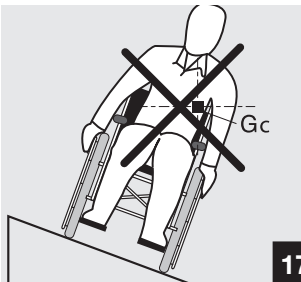
La position de la roue arrière est déterminée en usine et ne doit pas être changée par vous-même. Si nécessaire, ces changements de position doivent être effectués par un technicien professionnel qui en analysera l'impact sur votre stabilité au quotidien en accord avec votre Prescripteur médical ; merci de prendre conseil auprès de votre Distributeur.

2. Conseils d'utilisation


2.1 Dépliage et pliage du fauteuil roulant

2.1.1 Déplier le fauteuil (figure 18) :

- Saisissez d'une main l'accoudoir ou le montant d'un côté du fauteuil et basculez-le légèrement vers vous (de façon à soulever la roue arrière et la roue pivotante du sol) ;
- De l'autre main appuyez sur la garniture du siège jusqu'à ce que le tube supportant la garniture soit totalement déplié. La garniture du siège doit être complètement tendue ;
- Ensuite, engagez les deux freins manuels, ouvrez les repose-pieds/repose-jambes et contrôlez la garde au sol (distance repose-pied/sol)(cf. § B-2.1.4). Vous pouvez maintenant vous asseoir.



17

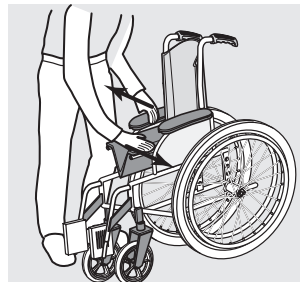

18

2.1.2 Replier le fauteuil (figures 19 et 20) :

- Rabattez les repose-pieds/repose-jambes le long des potences ;
- Saisissez les deux bords (avant et arrière) de la toile de l'assise et soulevez.



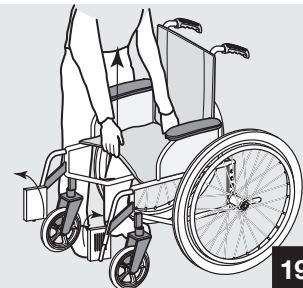
Avertissement :

- le fauteuil doit être plié avec la toile d'assise maintenue vers le haut pour éviter toute détérioration par le système de pliage.

2.2 Propulsion du fauteuil roulant

La propulsion du fauteuil roulant s'effectue par l'intermédiaire des mains courantes montées sur les roues. Les mains courantes peuvent être réglées en fonction de votre stature pour vous permettre de les saisir correctement.

Le personnel médical ou paramédical qualifié sera en mesure de vous donner des conseils sur la méthode de propulsion la mieux adaptée à votre handicap.



19



20

2.3. Soulever le fauteuil

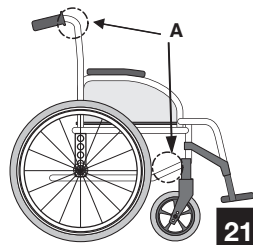
Pliez préalablement le fauteuil (voir § 2.1.2), toujours soulever le fauteuil par les points fixes (A) indiqués sur la figure 21.



Avertissement :

Ne jamais soulever le fauteuil par des parties amovibles (accoudoirs, repose-pieds, roues arrière).

Vérifier que les tubes de dossiers soient bien fixés au châssis.



21

3. Contrôles de la sécurité et maintenance

3.1 Contrôle des performances

En tant qu'utilisateur, vous serez le premier à remarquer les éventuels défauts de fonctionnement de votre fauteuil roulant. Le tableau suivant indique les symptômes de dysfonctionnement les plus facilement identifiables et les contrôles préliminaires que vous pouvez vous-même effectuer.

Si les symptômes sont persistants après avoir corrigé la pression des pneus et resserré les écrous et vis, veuillez consulter votre revendeur.

En effet, les chambres à air des roues sont les seuls éléments que vous pouvez réparer vous-même (cf. § B-2.3).

Si les vis et écrous ne sont pas assez serrés ou desserrés et si l'axe de fourche avant n'est pas perpendiculaire au sol, veuillez contacter votre Distributeur pour qu'il applique les bons réglages et les serrages appropriés.

Le fauteuil se déporte vers la droite	Le fauteuil se déporte vers la gauche	Le fauteuil tourne ou se déplace lentement	Les roues pivotantes fassent	Grincements et cliquetis	Jeu dans le fauteuil	CONTRÔLES À EFFECTUER
●	●	●				Vérifier que la pression est correcte et identique dans chaque pneu (cf. § B-2.3)
		●	●	●	●	Vérifier que la visserie est suffisamment serrée
●	●	●				Vérifier que l'angle des fourches avant est correct
●	●		●			Vérifier que les roues pivotantes sont bien en contact avec le sol

(Couple de serrage minimum recommandé : M5 = 4 Nm ; M6 = 7 Nm & M8 = 17 Nm)

3.2 Contrôle de l'état général

Toute intervention de maintenance est du ressort de votre Distributeur qui possède les compétences techniques nécessaires.

Nous vous recommandons d'ailleurs de confier au minimum une fois par an votre fauteuil à votre revendeur pour une inspection complète. En effet, une maintenance régulière permet d'identifier et de changer les pièces défectueuses et usées et le fonctionnement quotidien de votre fauteuil s'en trouvera amélioré.

Faites inscrire la date de visite et apposer le cachet du Distributeur sur la page 35 "Visites d'entretien" pour l'application de la garantie Invacare® Poirier®.

Toutes les réparations doivent être effectuées par votre distributeur Invacare®, exceptés le changement ou la réparation de la chambre à air des pneumatiques.

Contrôles à effectuer régulièrement par vous-même ou votre entourage :

a. Etat général

Vérifier que le fauteuil se déplie et se plie facilement.

Vérifier que le fauteuil se déplace en ligne droite (pas de résistance ou de déviation).

b. Freins manuels

Vérifier que les freins manuels ne touchent pas les pneus en déplacement.

Vérifier que les freins manuels fonctionnent facilement.

Vérifier que les articulations ne sont pas usées et n'ont pas de jeu excessif.

c. Système de pliage

Examiner le système de pliage pour contrôler qu'il n'est pas usé ou déformé.

d. Protège-vêtements / accoudoirs

Contrôler que toutes les fixations sont bien en place et serrées

e. Accoudoirs

Vérifier que les accoudoirs sont fermement attachés mais faciles à ôter.

f. Appui-bras

Vérifier que les appui-bras sont en bon état.

g. Garnitures de siège et de dossier

Vérifier que la garniture est en bon état.

h. Roues arrière

Vérifier que les écrous des roues et roulements de précision sont bien serrés.

Contrôler que les roues sont parallèles au châssis.

i. Mains courantes

Vérifier l'absence de rugosités.

j. Rayons

Vérifier que les rayons ne sont pas déformés, desserrés ou cassés.

k. Roues pivotantes

Vérifier le serrage de l'axe en faisant tourner la roue : elle doit s'arrêter progressivement.

l. Fourches / tubes de direction

Vérifier que toutes les fixations sont bien serrées.

m. Pneumatiques et bandages

S'il s'agit de pneumatiques, vérifier la pression (valeur indiquée sur le flanc) ; s'il s'agit de bandages, contrôler l'usure de la bande de roulement.

n. Entretien

Nettoyer toutes les pièces avec un chiffon sec, sans aucun produit, sauf les garnitures qui peuvent être lavées avec de l'eau savonneuse uniquement.

Veiller à bien essuyer le fauteuil s'il est mouillé (après lavage ou sortie sous la pluie).

Eviter de rouler sur des sols humides ainsi que sur des graviers, de l'herbe, etc. (attention : le sable et l'eau de mer détériorent particulièrement les roulements à billes) ; pour un usage en intérieur, nous vous recommandons d'utiliser des roues pivotantes à bandage, plus particulièrement pour rouler sur des moquettes.

Ne pas exposer le fauteuil à une chaleur supérieure à 40° Celsius (par exemple dans un véhicule).

4. Transport

Votre fauteuil Invacare® Action³ Junior a fait l'objet d'essais de choc conformément à la norme ISO-7176-19:2001, Il peut être utilisé à des fins de transport dans des véhicules spécialement adaptés à cette fin et il doit être arrimé conformément aux méthodes décrites à la page suivante.

Rappelez-vous que le mieux est toujours de transférer l'utilisateur sur un siège de voiture ordinaire.

Test no : S10173 (Chassis standard) & S10174 (Chassis Stabilizer), Client : Invacare UK Ltd, Date : 2008-01-10

Les dispositifs d'arrimage de sécurité mentionnés dans ce texte doivent être conformes à la norme ISO-10542. Nous avons choisi de travailler avec Unwins, fabricant connu de dispositifs d'arrimage de qualité pour fauteuils roulants.

4.1. Observations avant de transporter le fauteuil roulant dans un véhicule.

- Le mieux est toujours de transférer l'utilisateur sur un siège de voiture ordinaire et d'utiliser le dispositif d'arrimage du véhicule.
- Les fauteuils roulants sont testés dans leur configuration de base. L'utilisation dans d'autres configurations n'a pas été testée.
- Si possible, les équipements supplémentaires doivent être solidement fixés au fauteuil ou en être séparés, et être entreposés de manière sécurisée dans le véhicule pendant le transport. (p.ex. les tablettes).
- Il est interdit de procéder à des modifications ou de modifier les dispositifs de sécurité, les éléments constitutifs et l'arceau ou les composants sans le consentement écrit d'Inva-care®.
- L'utilisateur du fauteuil roulant doit être attaché avec une ceinture pelvienne fixée au fauteuil en plus de la ceinture diagonale à 3 points).
- Les composants ou éléments du fauteuil roulant tels qu'accoudoirs, cale-tronc, roues, etc. (voir l'illustration 22) ne doivent pas pouvoir se glisser entre la ceinture et l'utilisateur.
- Le fauteuil roulant doit être solidement arrimé au véhicule au moyen d'une ceinture à 4 points conforme à la norme ISO-10542-2, conformément aux méthodes décrites dans le manuel.
- Si l'utilisateur reste dans le fauteuil roulant, il doit voyager dans le sens de marche de la voiture.

- L'inclinaison du dossier du fauteuil roulant doit être la plus proche possible de 90 degrés.

NB : Même si les produits et recommandations visent à améliorer la sécurité, les occupants du véhicule risquent toujours des lésions en cas de collision et **aucune garantie ne prend en charge ce type d'accident.**

Bonne position de la ceinture (Schéma 22)

4.2. Méthodes de fixation (Figures 23A, 23B & 23C)

* Photo non contractuelle. Uniquement pour information !
Référez vous aux recommandations du fabricant de ceinture.

A.Attache frontale avec sangles (Figure 23A)

1. Fixer les mousquetons sur l'avant du châssis.
2. Desserrer les freins et les sangles avant tirant le fauteuil vers l'arrière.
3. Resserrer les freins du fauteuil roulant.

B. Fixations arrière (Photos 23B pour propulsion par main-courante & 23C pour version Transit)

1. Attacher les crochets des sangles arrière sur le châssis juste au-dessus de la platine porte-axe, au-dessus de la roue arrière.
2. Serrer les sangles.

C.Attache de la ceinture de sécurité et de la ceinture de maintien

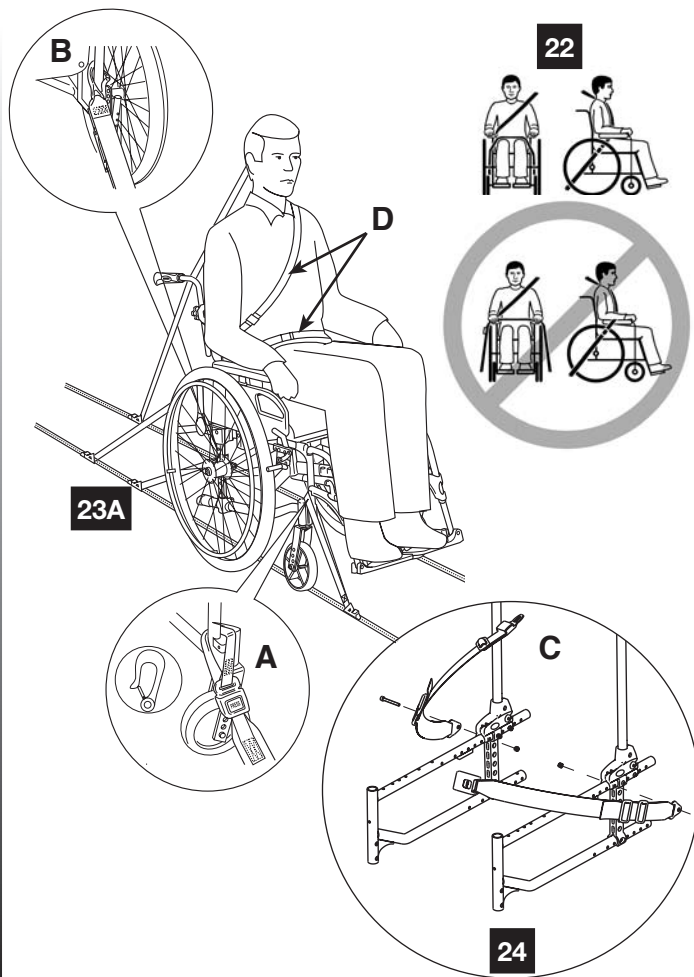
1. Vérifier que la ceinture de maintien sur le fauteuil roulant soit correctement verrouillée.
2. Verrouiller la ceinture de sécurité 3 points du véhicule sur l'utilisateur.

Si votre fauteuil roulant n'est pas équipé d'une ceinture de sécurité, nous vous recommandons, si possible, de prendre place sur le siège de la voiture.

Aucun éléments ou composants du fauteuil roulant (comme accoudoirs, cale-troncs, roues, etc.) ne doivent pouvoir se glisser entre la ceinture de sécurité et l'utilisateur.

D. Ceinture de maintien du bassin

1. La ceinture de maintien doit être montée comme illustré ci-contre (Schéma 24 & détail C).



5. Résumé des conditions de garantie

Garantie contractuelle

Les fauteuils roulants Invacare® sont garantis contre tout vice de construction résultant d'un défaut de matière ou de fabrication pendant une durée de 2 ans pour les fauteuils manuels, à compter du jour de livraison. **Cette date doit être inscrite sur le certificat inclus dans ce guide en page 34.**

Cette garantie est expressément limitée à la remise en état ou l'échange gratuit (pièces et main d'œuvre) des pièces reconnues défectueuses dans les ateliers du Distributeur après accord de Invacare® Poirier®, étant ici précisé que cette remise en état ou cet échange pourront être effectués avec des pièces neuves, des sous-ensembles neufs ou échange standard des dites pièces après appréciation souveraine de Invacare® Poirier®.

Conditions d'application

Pour l'application de cette garantie vous devez vous adresser à votre Distributeur Invacare® Poirier et lui présenter le certificat dûment complété.

Les frais de port et d'emballage ainsi que les frais de déplacement sont à la charge de l'acquéreur. Votre Distributeur pourra ou non les prendre à sa charge selon les conditions de vente qu'il pratique.

La garantie s'applique à condition que :

- Le fauteuil soit réparé dans les ateliers du Distributeur ou de Invacare® Poirier®.
- Les vérifications périodiques mentionnées au dos du certifi-

cat de garantie aient été réalisées en temps voulu dans les-dits ateliers.

Réserves

Nous attirons votre attention sur le fait que cette garantie ne pourra être appliquée en cas :

- D'accidents, chutes, chocs, utilisation anormale.
- D'usure normale résultant de l'utilisation du fauteuil.
- Du mauvais entretien du fauteuil.
- D'un démontage, réparation ou modification fait en dehors des ateliers du Distributeur ou de Invacare® Poirier®.
- Si la preuve d'achat ne peut être apportée.

La garantie ne couvre pas :

- Le remplacement de pièces soumises à une usure normale tenant à l'utilisation du fauteuil (pneumatiques ou bandages, patins de frein, garnitures d'appui-bras, d'assise et de dossier, palettes repose-pieds, etc.)

6. Résumé des instructions d'utilisation pour une sécurité optimale

- Limite du poids de l'utilisateur : 80 kg ;
- Ne pas essayer d'atteindre des objets si l'on doit pour cela se pencher en avant ;
- Ne pas essayer d'atteindre des objets au sol si l'on doit pour cela se pencher entre ses genoux ;
- Ne pas trop s'incliner en arrière pour atteindre des objets situés derrière soi : il y a risque de basculement en arrière ;
- Toujours serrer les deux freins manuels simultanément ;
- Les freins manuels sont des freins de parking : ils ne doivent **en aucun cas** être utilisés pour ralentir le fauteuil ou servir d'appui lors des transferts ;
- Ne pas basculer le fauteuil roulant (trottoirs, marche) sans l'aide d'une tierce-personne ;
- Ne pas se faire porter dans les escaliers fixes ou roulants assis dans le fauteuil avec 1 seul assistant : risques de blessures ;
- Ne pas utiliser le fauteuil si les pneus ne sont pas gonflés à la pression indiquée sur le flanc ;
- Ne pas surgonfler le pneu : risque d'éclatement et donc de blessures corporelles ;
- Ne pas exposer le fauteuil roulant à une chaleur supérieure à 40° C ;

Pour éviter toutes blessures, maintenir ses doigts à distance des parties mobiles (accoudoirs, système de pliage, repose-jambes/repose-pieds), et avoir un bon placement avant de soulever le fauteuil.


B. DESCRIPTION DE VOTRE FAUTEUIL

I. Présentation

I.1. Introduction

Votre fauteuil, même s'il a bénéficié d'un certain nombre de pré-réglages standards avant votre achat, doit être spécifiquement adapté à vos besoins propres. Les paragraphes détaillés suivants vous présentent les différentes fonctionnalités et ajustements possibles, ainsi que les options disponibles. Certains réglages pourront être effectués par vous-même, d'autres nécessiteront l'intervention de votre Distributeur.

Important : suivant le modèle ou les options choisies, votre nouveau fauteuil **Action[®] Junior** peut-être équipé ou non des éléments ou options qui sont décrits dans les pages suivantes.

 **Ce sigle vous signale un avertissement, il vous faut impérativement respecter les consignes qui vous sont données dans ces paragraphes pour vous éviter tous dommages corporels ainsi qu'à votre entourage.**

 **Ce sigle vous indique une information susceptible de vous intéresser, merci de contacter votre distributeur.**

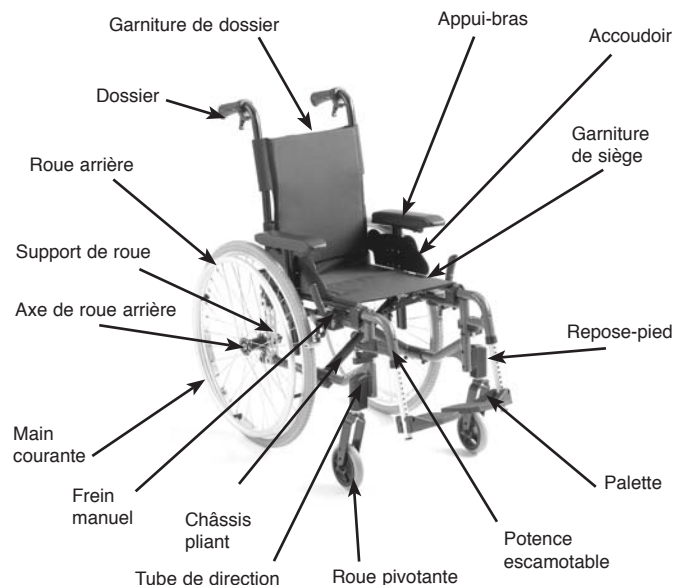
I.2. Description générale (voir photo)

Votre fauteuil est composé de différentes pièces dont les principales sont citées dans ce manuel. Nous vous proposons donc de vous familiariser avec les termes suivants afin de mieux comprendre le fonctionnement de votre fauteuil :

- **L'assise** comprend les **garnitures de siège et de dossier**, le **dossier** et les **accoudoirs**. Cet ensemble est conçu pour vous fournir un confort optimal ;
- **La potence escamotable** ou le **repose-jambes** : il s'agit de la pièce-support entre le châssis et le **repose-pied**, elle pivote pour faciliter les transferts et se démonte pour le transport ;
- **Le repose-pied** comprend le **tube réglable** et la **palette** qui soutient le pied ;
- **Le châssis pliant** comprend les **montants latéraux** et le **système de pliage** incluant les **tubes porte siège**. Ces pièces constituent le châssis qui est l'élément porteur du fauteuil, et dont la robustesse est particulièrement étudiée (testée à 80 kg) ;
- **Le tube de direction** est la liaison entre le châssis et les **roues pivotantes**, il permet de régler l'angle d'assise ;
- **La roue arrière** est composée de la **roue**, de l'**axe** et de la **main courante**. Les roues arrière garantissent la stabilité à l'arrière et permettent la propulsion du fauteuil par les mains courantes. Elles sont fixées sur les **supports de roues** multiréglables ;

● **La roue pivotante** est composée de **la roue avant** et de **la fourche**. Les roues pivotantes assurent le contact avec le sol à l'avant et déterminent la direction par l'orientation des fourches ;

● **Le frein manuel** est un frein de parking. Les deux **freins manuels** servent à immobiliser le fauteuil pendant des arrêts prolongés ;



2. Réglages

2.1. Assise

2.1.1. Garniture de siège

- Sièges standard :

- Sièges toile nylon avec ou sans velcro : les bandes Velcro sont nécessaires au bon maintien du coussin (*Photo 1*) en place, veillez au bon positionnement de celui-ci sur le siège.
- Sièges toile rembourré : il assure un soutien confortable pour l'utilisateur qui n'a pas besoin de coussin au quotidien.

❗ Les sièges standard ne possèdent pas de réglages ; s'ils se détendent, il convient d'en demander le remplacement auprès de votre Distributeur. Invacare propose une gamme de coussins de siège adaptés à vos besoins, merci de consulter votre Distributeur.

⚠ Toujours utiliser une toile équipée de bandes Velcro avec un coussin, ceci pour éviter tout glissement et ainsi, les risques de chutes !



1

2.1.2. Types de dossiers

- Dossiers fixes :

● Dossier fixe 0° et 7° : ces deux dossiers ne nécessitent pas de réglages, ils peuvent être équipés d'un dossier toile rembourré ou d'un dossier réglable en tension (en option, voir § 2.1.3.). La version 7° peut être équipée en option de poignées à pousser réglables en hauteur pour améliorer le confort de la tierce-personne.

- Dossier pliant à mi-hauteur (*photos 3 et 4*) : pour réduire l'encombrement lors de transport, actionnez le levier (A) en tirant ou poussant sur celui-ci et rabattez la partie haute du dossier.

Pour revenir à la position initiale, ramenez la partie haute à la verticale, l'enclenchement est automatique.

⚠ Toujours vérifier le bon verrouillage du dossier avant que l'utilisateur ne s'installe dans le fauteuil afin d'éviter tout risque de blessure !

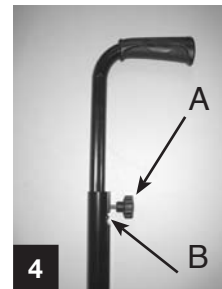
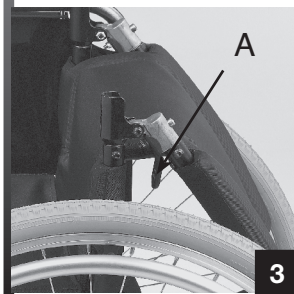


Le dossier pliant à mi-hauteur est disponible avec des poignées à pousser réglables en hauteur pour un meilleur confort de pousser de la tierce personne (photo 4), desserrer la molette (A), monter la poignée à la hauteur désirée et resserrer ferment la molette (A).

Quand la poignée est au maximum du réglage en hauteur et pour des raisons de sécurité, un bouton poussoir (B) se bloque dans son logement juste en dessous de la molette (A), il est accessible au travers de la toile de dossier pour rabaisser la poignée à une hauteur appropriée.

⚠ Vérifier que les poignées réglables sont bien bloquées avant utilisation

⚠ Ne pas régler les poignées à pousser au maximum en hauteur quand vous devez basculer le fauteuil pour franchir un obstacle, par exemple. Veuillez consulter le paragraphe 1.4.1 pour les bonnes pratiques.



- Dossiers inclinables 0° à 30°

Hauteur 43 cm en série et 51 cm en option.

Ils sont désormais équipés d'un nouveau système de maniement par gâchettes :

L'inclinaison se règle très facilement ce qui permet d'obtenir une position de repos toujours confortable.

Tirez sur les gâchettes (A) simultanément pour assurer un angle identique des deux côtés et relâchez les gâchettes à l'angle choisi. (Photo 5)

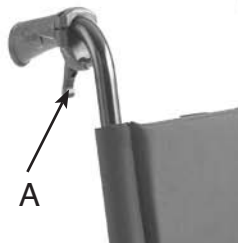
● Version mécanique

Nota : Poussez sur le dossier avant d'actionnez les gâchettes afin de libérer le système de blocage (mécanisme de sécurité autoverrouillant). (Photo 5A).


Il y a 4 positions d'inclinaison possibles, tous les 10°.

● Version pneumatique (Photo 6).

Les vérins à gaz apportent une aide au relevage, toujours effectuer cette manipulation avec l'utilisateur assis dans le fauteuil.



5

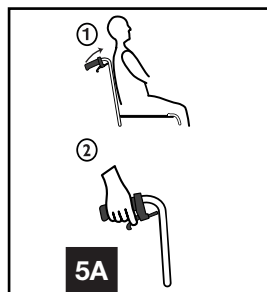

5A

Réglage de l'inclinaison en continu de 0° à 30°



Cette manipulation doit être effectuée uniquement par la tierce-personne. Toujours vérifier le bon verrouillage du dossier pour que l'utilisateur soit installé en toute sécurité.

Pour éviter toute blessure, maintenez vos doigts à distance des parties mobiles (leviers, mécanismes, etc..) !

Pour ne pas déstabiliser la position de l'utilisateur, évitez d'actionner les leviers (A) lors d'un transfert latéral, par exemple ! (Photos 6 & 7)

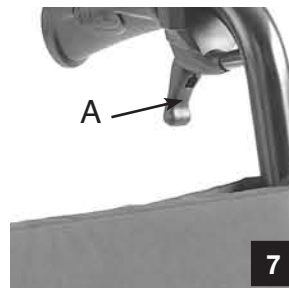
Nota : Pour sécuriser l'utilisation avec le dossier incliné, nous recommandons l'utilisation de roulettes anti-bascule (disponibles en option).

La maintenance des mécanismes des dossiers inclinables est variable suivant l'utilisation, merci de contacter votre Distributeur.

❗ Selon l'évolution de votre handicap, vous trouverez un dossier de la gamme **Action' Junior** adapté à vos nouveaux besoins, merci de prendre conseil auprès de votre Distributeur.



6



7

2.1.3. Garnitures de dossiers

- Dossiers toile standard :

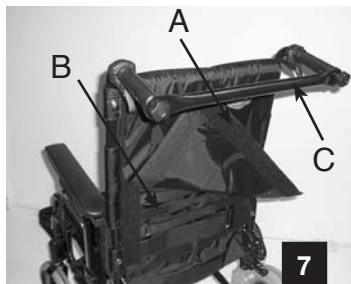
- Dossier toile rembourré : il assure un très bon confort au quotidien pour l'utilisateur qui n'a pas besoin d'un support de tronc spécifique.

(i) Si le dossier toile rembourré se détend, il convient d'en demander le remplacement auprès de votre Distributeur.

- Dossier réglable en tension (*photo 7*) : il permet d'ajuster la courbure du dossier à la morphologie et à la position de l'utilisateur.

Soulevez le rabat (A) et tirez sur les sangles (B) afin de les tendre ou de les détendre. Chaque sangle est réglable indépendamment des autres. Repositionnez le rabat (A).

⚠ Vérifier la tenue et la bonne mise en place des bandes Velcro. Toujours effectuer ce réglage avant que l'utilisateur ne s'installe dans le fauteuil afin d'éviter tout risque de blessure !




2.1.4. Potences à 80° et 90° / Repose-pieds / Repose-Jambes

- Potences standards 80° (*photo 8*) : elles sont escamotables pour les transferts et amovibles pour le transport. Agissez sur le levier (A) en appuyant latéralement et faites pivoter vers l'extérieur ou vers l'intérieur en cas d'espace réduit. Pour revenir à la position initiale, ramenez la potence en ligne, l'enclenchement est automatique.

Pour ôter la potence, tirez simplement vers le haut dès lors que vous aurez déverrouillé le système. Procédez à l'inverse pour la remettre en place en conservant la position déverrouillée.

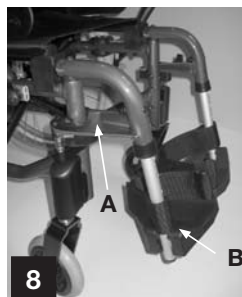- Potences standards 90° (*photo 9*) : Pour les enlever tirez simplement vers le haut. Pour escamoter, tirez légèrement vers le haut (environ 2 cm) et faites pivoter vers l'extérieur ou vers l'intérieur.





- Réglables en hauteur (Photo 10) : Retirez la vis hexagonale (B) et positionnez la palette à la hauteur désirée (en fonction des trous de réglages prédéterminés). Alignez les deux trous et repositionnez la vis hexagonale, resserrez le tout sans forcer.

- Indexables à 0° ou 30° (Photo 11) : Retirez la vis hexagonale (C) et positionnez l'indexeur (D) à l'emplacement 30° sur le montant vertical (trou prédéterminé). Alignez les deux trous et repositionnez la vis hexagonale, resserrez le tout fermement.

- Repose-Jambes Amovibles et Escamotables :

Nota : Le repose-jambe est spécifique à l'Action³ Junior et ne peut être monté sur un Action³.

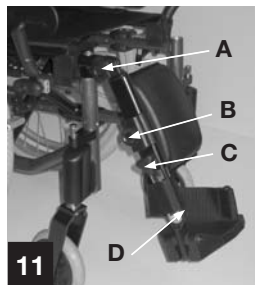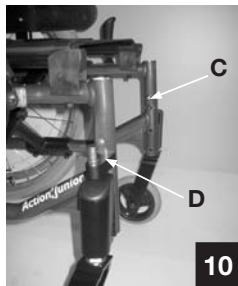Pour les enlever tirez simplement vers le haut.
Pour escamoter, tirez légèrement vers le haut (environ 2 cm) et faites pivoter vers l'extérieur ou vers l'intérieur.




- Repose-Jambes réglable (Photo 11a) : L'inclinaison est réglable par platine crantée : desserrez le bouton (A), réglez à l'angle désiré en fonction des crantages, resserrez fermement.

La hauteur du coussin est réglable : desserrez le bouton (B), réglez à la hauteur désirée, resserrez fermement.

La hauteur de la palette est réglable : desserrez le bouton (C), réglez à la hauteur désirée en fonction des trous de réglages prédéterminés, resserrez fermement.

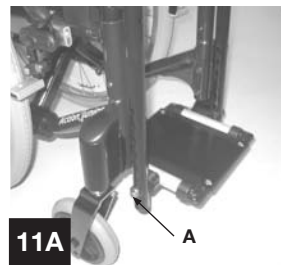L'inclinaison de la palette est réglable par platine crantée : desserrez la vis (D), réglez à l'angle désiré en fonction des crantages, resserrez fermement.



2.1.5 Accoudoirs (photos 12, 13 & 13A)

Pour les enlever, tirez simplement vers le haut; procédez à l'inverse pour les remettre en place.

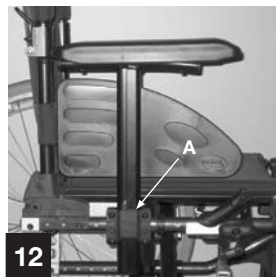
Pour les régler en hauteur, dévissez la vis (A), réglez à la hauteur désirée et resserrez sans forcer la vis (A).

Nota : l'ajustement de la protection latérale peut-être nécessaire en fonction de la hauteur choisie, dévissez les deux vis de fixation et remplacez l'ensemble jusqu'à la nouvelle position, resserrez fermement les deux vis.

Nota : les accoudoirs sont montés par paire sur le fauteuil, lors du démontage, rappelez-vous que vous avez un côté droit et un côté gauche !





Ne jamais soulever le fauteuil par les accoudoirs !
Pour éviter toute blessure lors des opérations d'escamotage, de démontage ou de réglage, maintenez vos doigts à distance des parties mobiles !



2.2. Châssis

2.2.1 Système de pliage avec croisillon télescopique (schéma 14)

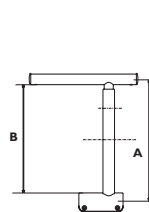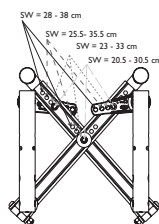Votre fauteuil bénéficie désormais d'un croisillon télescopique qui offre 4 réglages de la largeur d'assise :
de 20,5 à 28 cm ou de 30,5 à 38 cm.





Inch	8"	9"	10"	11"	12"	13"	14"	15"
Cm	20,5	23	25,5	28	30,5	33	35,5	38
A	27,24	28,97	30,82	32,75	34,85	36,91	39,03	41,19
B	24,30	26,03	27,88	29,81	31,91	33,97	36,09	38,25

Les toiles d'assise et de dossier sont, elles aussi, réglables en largeur.



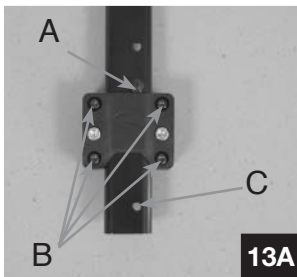L'ensemble de ces réglages et changements de largeurs de siège doivent être effectués par un technicien professionnel en accord avec votre Prescripteur médical ; merci de demander conseil auprès de votre Distributeur.



 Ces informations sont données à l'utilisateur à titre indicatif seulement.

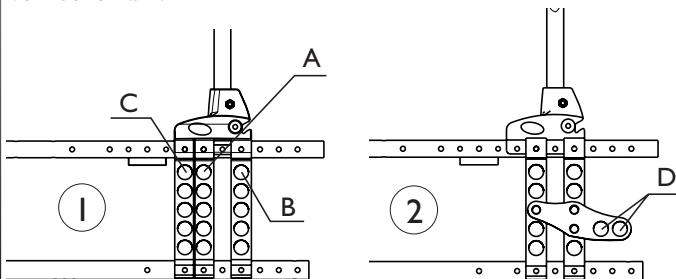
Pour plier et déplier votre fauteuil, consultez le chapitre A Généralités au paragraphe 2.1.


2.2.2 Flancs

Les flancs ou montants latéraux sont principalement prévus pour recevoir les tubes de direction pour les roues avant et les supports de roue multiréglables pour les roues arrière.

Ces supports de roues permettent cinq positions en hauteur et trois positions longitudinales (Active = avancée pour une manialbilité supérieure; Standard = livrée en série; Passive = reculée pour une stabilité accrue, de série avec les dossiers inclinables et les versions Transit (12") voir schéma 1; Position double déport arrière (option ou accessoire).

Pour éviter le basculement arrière avec des utilisateurs amputés, 2 positions très reculées de l'axe du dossier assurent une grande stabilité. (livré avec une paire de freins spécifiques), voir schéma 2.



 Ces informations sont données à l'utilisateur à titre indicatif seulement.

Nota : l'ensemble de ces réglages et changements de position doivent être effectués par un technicien professionnel en accord avec votre Prescripteur médical ; merci de demander conseil auprès de votre Distributeur.

2.2.3. Tubes de direction

Ils permettent l'inclinaison de l'assise (1,5°, 5° or 8,5°) en fonction des capacités de l'utilisateur, de son mode de propulsion, de la hauteur sol-siège désirée et des roues avant et arrière choisies.

2.2.4. Kit Stabilizer (photo 14)

Pour éviter les chutes en avant des enfants actifs lorsqu'ils se déplacent, montent ou descendent en appui sur les palettes et pour améliorer la stabilité générale, un kit "Stabilizer" (élargisseur de voie avant) est disponible en option.



14

2.3. Roues arrière


2.3.1. Roues

Les roues arrière de 22 " (550 mm) sont rayonnées, les roues de 20 " (500 mm) sont uniquement rayonnées, elles peuvent être fournies avec un pneumatique ou un bandage increvable.


Réparation (*photo 15*) : quand un pneu est crevé, il est nécessaire de le démonter pour effectuer la réparation.

Retirez l'ensemble (pneu et chambre) de la jante, réparez ou remplacez la chambre à air, remettez la en place dans le pneu et repositionnez l'ensemble sur la jante. Respectez la pression de gonflage indiquée sur le flanc du pneu.

Nota : Ne pas oublier que pour préserver l'interchangeabilité des roues des fauteuils équipés d'axes à démontage rapide, les deux pneus doivent être gonflés à la même pression.


 La pression indiquée sur les flancs du pneu ne doit jamais être dépassée sous risque de blessure en cas d'éclatement!



 Les pneumatiques sont sujet à usure, les rugosités du sol et le mode de conduite influent également sur leur longévité ; veillez à leur remplacement régulier pour éviter les désagréments de la crevaison ; merci de demander conseil auprès de votre Distributeur.

2.3.2. Mains courantes

Elles servent à la propulsion, elles sont en aluminium anodisé.

 Les mains courantes sont en contact permanent avec les mains, assurez-vous régulièrement qu'elles ne sont pas endommagées !

2.3.3. Axes


Les axes relient les roues et le châssis, ils peuvent être fixes ou à démontage rapide :

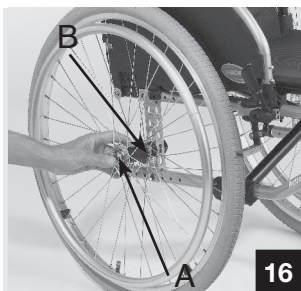
- Axes fixes : surveillez régulièrement le bon serrage de l'axe.
- Axes à démontage rapide (photos 16 & 17) : enfoncez le bouton (A) et insérez l'axe dans le moyeu de la roue.

Positionnez l'ensemble dans le palier (B) du support de roue multiréglable jusqu'au blocage en position.


Les billes d'arrêt (C) doivent dépasser du palier (D) et il ne doit pas y avoir de jeu latéral important.

Pour réduire le jeu au minimum (photo 16), ôtez l'axe et réglez l'écrou à l'aide d'une clé de 19 mm, bloquez l'axe avec une clé plate de 11 mm.

 Contrôlez régulièrement la propreté de l'axe et des billes d'arrêt. Pour éviter tout risque de chute, il est



16

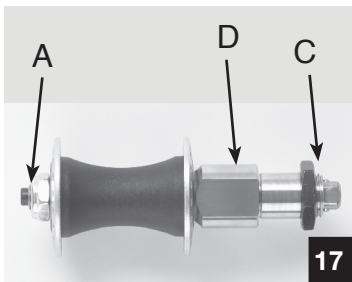

17

absolument essentiel que le bouton (A) et les billes d'arrêt soient entièrement dégagées pour assurer le blocage parfait des roues arrière.

L'axe à démontage rapide est une pièce de précision, évitez-lui les chocs et nettoyez le régulièrement pour assurer le bon fonctionnement de l'ensemble.

2.4. Roues pivotantes


2.4.1. Roues

Les roues avant existent en diamètre 5 " (125 mm) avec un bandage increvable. 2 largeurs sont disponibles, 1" (25 mm) et 1". 3/4" (45 mm).

Nota : Reportez-vous au paragraphe 2.3.1. pour l'entretien courant.

2.4.2. Fourches

Différentes positions de fourche sont disponibles suivant les choix des hauteurs sol-siège, des roues avant et des roues arrière.

 Si vous désirez changer de fourche ou de roues avant ou arrière, merci de demander conseil auprès de votre Distributeur.

2.5. Freins

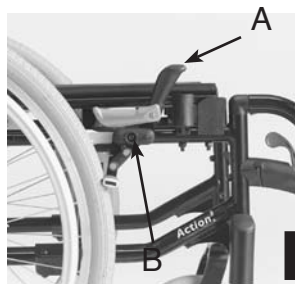
2.5.1. Freins manuels

Les freins manuels (*photos 18 & 19*) servent à immobiliser le fauteuil pendant des arrêts prolongés. Ils ne servent pas à ralentir la vitesse du fauteuil ou d'appui pour réaliser un transfert. Ils doivent être actionnés simultanément.


Le freinage se fait en poussant la poignée (A) vers l'avant du fauteuil. La poignée (A) se replie pour faciliter le transfert. Tirer au préalable la poignée vers le haut. Une fois que les freins ont été actionnés, le fauteuil ne doit plus pouvoir bouger.

Nota : les réglages des freins dépendent du diamètre et du type de roues utilisés. Après avoir réparé un pneu dégonflé ou après usure du pneumatique ou du bandage, il peut être nécessaire de régler le ou les frein(s).


Pour effectuer le réglage, desserrez les deux vis (B) et faites coulisser l'ensemble du frein pour obtenir entre la roue et le patin de frein en position non verrouillée, la valeur (X) suivante : Bandage X = 6 mm - Pneumatique X = 5 mm



18

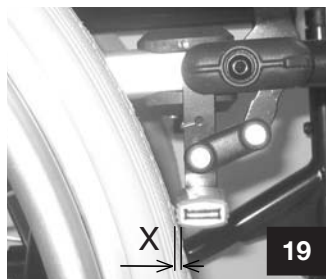

19

 Resserrez fermement les vis (B) après réglage. Maintenez vos doigts loin des parties mobiles pour éviter toute blessure !

2.5.2 Freins tambour (*photos 20 & 21*)

Ils assurent les mêmes fonctions que les freins manuels avec en plus la fonction de ralentissement (dans une pente par exemple) et une sécurité accrue car ils restent efficaces lorsque le pneu est dégonflé!

Deux versions sont disponibles : commande par la tierce-personne et double commande (tierce-personne et utilisateur). Pour ralentir (*photo 20*), tirez progressivement le levier (A) vers le haut. Pour bloquer en position "parking", le levier (A) étant serré, poussez sur le verrou (B) pour l'engager dans les crans de la poignée de frein ; tirez le verrou vers le haut pour le débloquer. Pour ajuster le freinage (*photo 21*) : tournez la vis (C) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour augmenter la force de freinage et inversement pour la diminuer.



20



21

❗ les réglages spécifiques des freins tambour doivent être effectués par votre Distributeur.

⚠ Toujours agir sur les deux freins simultanément et ne pas vous engager dans les pentes de plus de 5% pour assurer le parfait contrôle du fauteuil.

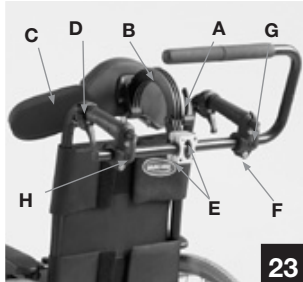
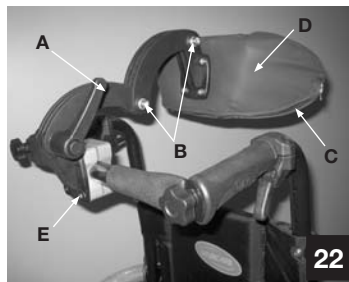
2.6. Options

2.6.1 Appui-tête standard et évolutif

Montage (photos 22 & 23): Assemblez les 2 coquilles et le mécanisme d'appui-tête sur le tendeur de dossier à l'aide des 2 vis fournies (E), serrez fermement dans la position requise à l'aide d'un tournevis Pozidriv n °2.

Pour l'escamoter, dévissez légèrement la manette (A) et faites basculer l'ensemble appui-tête vers l'arrière. Procédez à l'inverse pour le remettre en place.

Réglez simultanément l'inclinaison et la hauteur en desserrant légèrement la manette (A) et les deux vis (B) à la position désirée et resserrez fermement l'ensemble.



Réglez l'angle des oreillettes (C) en ouvrant la fermeture à glissière au niveau de la fixation de l'appui-tête et en desserrant les 2 vis (D), réglez à l'ouverture requise, resserrez et refermez l'ensemble.

Ne jamais régler l'appui-tête lorsque l'utilisateur est en appui dessus et bien vérifier la fixation au dossier pour éviter les risques de blessure.


Nota : la barre de poussée est escamotable pour plier le fauteuil, dévissez légèrement le levier (G), tirez vers le haut pour la dégager et positionnez la verticalement le long du tube de dossier. Pour la remettre en place, procédez à l'inverse et resserrez fermement le levier (G) en vous assurant que le levier (H) est également correctement serré.


⚠ Eviter de soulever le fauteuil par la barre de poussée. Il y a un risque de déverrouillage de la barre en poussant vers le haut. Maintenez vos doigts loin des parties mobiles pour éviter toute blessure !

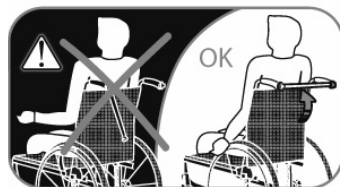
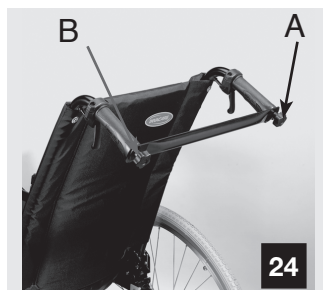
- Tendeur de dossier (*photo 24*) : il assure le maintien en tension de la garniture de dossier et permet à la tierce-personne une meilleure ergonomie lorsqu'elle pousse le fauteuil.

Nota : Il est escamotable pour plier le fauteuil, desserrez légèrement le bouton (A), tirez vers le haut et faites pivoter jusqu'à la position verticale, le long du dossier.

Pour le remettre en place, procédez à l'inverse et resserrez fermement le bouton (A) tout en vérifiant le bon serrage du bouton (B).

 Eviter de soulever le fauteuil par le tendeur. Il y a un risque de déverrouillage du tendeur en poussant vers le haut. Maintenez vos doigts loin des parties mobiles pour éviter toute blessure !

 Il est important de vous assurer que le tendeur de dossier est correctement monté et toujours bloqué lors de l'utilisation du fauteuil. (Voir étiquette) (*photo 25*).



25

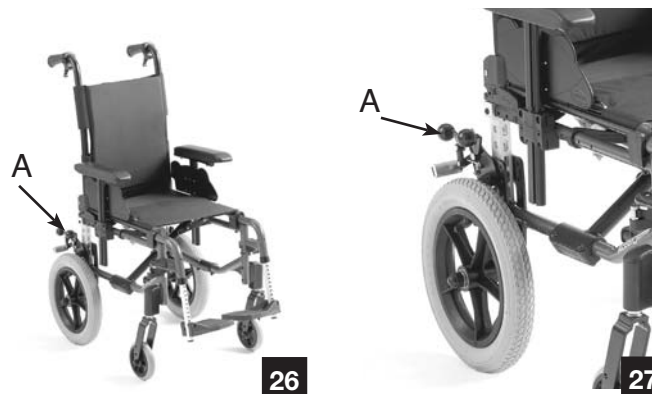
2.6.2. Options de propulsion

- Version transit (*photos 26 & 27*) : le fauteuil est destiné à être propulsé uniquement par la tierce-personne.

Pour faciliter les transferts latéraux et réduire l'encombrement, il est équipé de roues arrière de 12" (315 mm) à pneumatique ou à bandage increvable.

Les freins manuels (freins tambour en option) sont accessibles seulement par la tierce personne : actionnez la poignée (A) pour bloquer le fauteuil en position de parking.

Nota : pour plus de détails sur l'utilisation des deux types de freins, consulter les paragraphes 2.5.1 et 2.5.2.



26

27

2.6.3. Options de sécurité

- Ceintures de maintien

. Ceinture de maintien fermeture à boucle (*photo 28*) : pour fermer la boucle, engagez la partie (A) dans la partie (B), pour l'ouvrir pressez en (C).

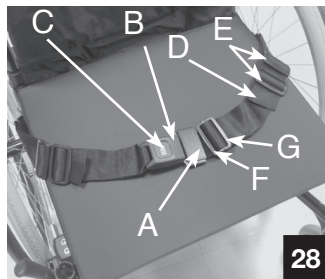
En fonction de la corpulence de l'utilisateur tirez, sur l'une ou l'autre des extrémités (D) de la sangle en passant dans les deux boucles (E)

Il est important que les deux boucles (E) soient utilisées. Sinon il y a un danger que la ceinture glisse.

Si la ceinture se détend, elle peut-être ajustée en tendant la sangle (F) en la passant dans la boucle (G).

Assurez-vous que l'utilisateur soit assis bien au fond de l'assise et que le bassin soit bien positionné.

Positionnez la ceinture sous la crête iliaque. Réglez la longueur de manière à ce qu'une main puisse passer entre la ceinture et le corps de l'utilisateur. Il est recommandé de garder la fermeture de la ceinture en position centrale et donc d'ajuster la sangle de chaque côté.



Ces réglages doivent être vérifiés à chaque fois que la ceinture est utilisée.

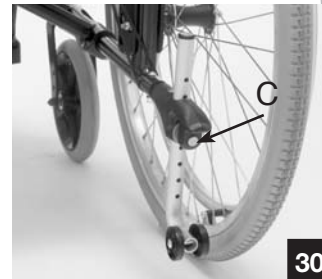
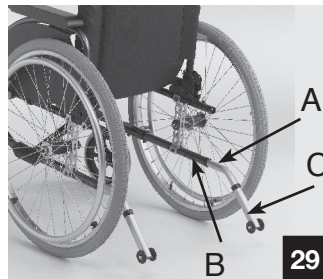


La fixation de la ceinture doit être conforme au schéma joint avec chaque ceinture; elle est fixée et réglée par votre Distributeur habituel.

Veiller à ce que les ceintures ne se prennent pas dans les rayons de la roue arrière. Les ceintures de maintien ne doivent pas être utilisées comme ceintures de sécurité dans un véhicule automobile.

- Roulettes anti-basculle (*photo 29*) : elles servent à éviter tout basculement vers l'arrière pour sécuriser l'utilisation d'un dossier inclinable, des évolutions dans des pentes ou des franchissements d'obstacles. Elles sont amovibles, appuyez sur le bouton (A) et tirez vers l'arrière. Procédez à l'inverse pour la remise en place, assurez-vous que le téton (B) dépasse bien du tube du châssis.

Elles peuvent rester en place en cas de non utilisation, tournez-les d'un demi-tour en appuyant sur le bouton (A) jusqu'à son indexation.




- Roulettes anti-basculer avec appui-pied (*photo 30 et schéma 31*) : Cette version inclut un appui pour l'aide au basculement (voir paragraphe *Tube basculeur* pour son utilisation). Elles se fixent dans les tubes arrières (après avoir ôté les bouchons) à l'aide d'une vis (A) et d'un écrou (B). Réglez la hauteur souhaitée (en respectant la distance recommandée) en agissant sur le bouton (A schéma 31).



La distance recommandée entre les roulettes et le sol est de 3 à 5 centimètres, cet ajustement est nécessaire par rapport à la position et au diamètre de la roue arrière. Actionnez le bouton (A schéma 31) ou (C photo 30) et réglez le manchon porte roulettes à la distance souhaitée en fonction des trous de réglage prédéterminés.



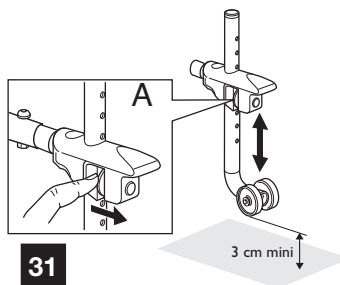Assurez-vous que le téton soit bien positionné dans les trous de réglage prédéterminés afin d'éviter tout risque de chute.



31



32

- Tube basculeur (*photo 32*) : il permet à la tierce-personne de basculer facilement le fauteuil lors de franchissement d'obstacles (trottoir, marche,...), appuyez dessus avec le pied (droit ou gauche) et maintenez l'équilibre à l'aide des poignées à pousser (voir paragraphes 1.3 et 1.4).

Le tube basculeur se fixe de la même façon et dans le même tube que les roulettes anti-basculer avec appui-pied.

2.6.4. Autre option

- Tablette transparente (*photo 33*) : elle se positionne sur les appui-bras des accoudoirs longs uniquement, faites glisser la tablette en avant ou en arrière en fonction de la corpulence de l'utilisateur.



Ne pas déposer des objets lourds ou instables, des récipients avec des liquides brûlants ou corrosifs qui en tombant ou se versant pourraient entraîner des blessures graves.



33

3. Caractéristiques techniques et outillage

3.1. Caractéristiques techniques

Poids maximum de l'utilisateur :	80 kg
Largeur du siège :	20,5 / 23 / 25,5 / 28 30,5 / 33 / 35,5 / 38 cm
Profondeur de siège :	20 à 25 / 25 à 30 27,5 à 32,5 / 30 à 35 32,5 à 37 cm
Hauteur sol/siège :	46 / 43,5 / 41 cm
Roue arrière :	22" (550 mm) pneumatique
Roue avant :	5" (125 mm) bandage
Frein d'immobilisation :	Manuel à patin cranté
Dossiers :	Fixe, pliants à mi-hauteur, inclinables
Accoudoirs :	Amovibles
Potences & Repose-jambes :	Amovibles et escamotables
Garnitures d'assise :	Nylon noir
Châssis :	Aluminium, peinture époxy
Poids moyen du fauteuil :	14,5 kg

3.2. Outillage pour les réglages et l'entretien courant (non fourni)

Fonction	Outil
Frein	Clé six pans (allen) de 5 mm
Tube repose-pied	Clé six pans (allen) de 5 mm
Palette	Clé six pans (allen) de 5 mm
Accoudoirs	4 mm Allen key 10 mm open-end wrench
Appui-bras	Clé Torx T20
Roue avant	Clé plate de 13 mm (X 2)
Axe fixe de roue arrière	Clé plate de 24 mm (X 2)
Axe à démontage rapide	Clé plate de 19 mm Clé plate de 11 mm

Après-vente et recyclage

- Vous devez utiliser des pièces détachées Invacare® disponibles chez tous les Distributeurs Invacare®.
- Pour toutes réparations, veuillez vous adresser à votre distributeur qui se chargera de retourner votre fauteuil au service Après Vente Invacare®.
- Recyclage : Les pièces métalliques et les pièces en plastique sont recyclables (réutilisation du métal et de la matière plastique). La mise au rebut doit être effectuée selon les règles en vigueur au niveau national et local. Pour avoir des informations sur les sociétés de traitement des déchets de votre région, veuillez vous adresser à votre mairie.

3.3. Caractéristiques dimensionnelles



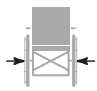

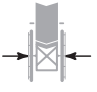

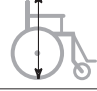
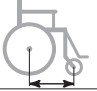
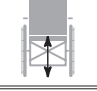

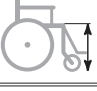
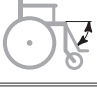
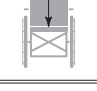
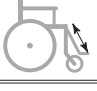



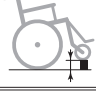

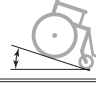

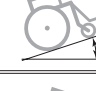

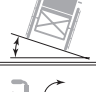

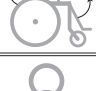




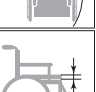
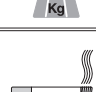

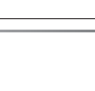
Image	Descriptif	Valeur mini/Maxi	Image	Descriptif	Valeur mini/Maxi
	Largeur d'assise effective (mm)	205/380		Hauteur du dossier avec appui-tête (mm)	1040/1160
	Largeur hors tout (mm)	395/570		Longueur hors tout (mm)	930
	Largeur du fauteuil plié (mm)	315		Longueur sans repose pied (mm)	700/750
	Hauteur totale (mm)	910/930		Distance entre roue avant et roue arrière (mm)	355/405
	Hauteur sol siège arrière (mm)	400/450		Angle de dossier (°)	0/30
	Hauteur sol siège avant (mm)	410/460		Angle de la potence (°)	80
	Hauteur de dossier (mm)	400/450		Distance entre repose pied et l'assise (mm)	210/410
	Hauteur du fauteuil si dossier plié (mm)	690/710		Distance entre les accoudoirs et le dossier (mm)	150/240

Image	Descriptif	Valeur mini/Maxi	Image	Descriptif	Valeur mini/Maxi
	Hauteur des accoudoirs fixes (mm)	-		Hauteur d'obstacle maximum (mm)	105
	Hauteur des accoudoirs réglables (mm)	150/240		Pente maximum en descente (°)	Std : 16 Stabilizer 23,5
	Hauteur des accoudoirs crantés (mm)	-		Pente maximum en montée (°)	Std : 12 Stabilizer 18
	Diamètre de la roue arrière (mm)	480/560		Dévers maximum latéral (°)	Std : 15 Stabilizer 18,3
	Diamètre de la main courante (mm)	440/490		Parties démontables	Roues Accoudoirs Repose-pieds
	Angle du plan d'assise (°)	1,5/8,5		Poids total à vide (kg)	14,5
	Hauteur sans roue arrière (mm)	500		Poids maximum de l'utilisateur (kg)	80
	Rayon de giration (mm)	750		Poids de la partie démontée la plus lourde (kg)	8,5
	Epaisseur du coussin (mm)	50		Matériaux de l'assise Classement au feu	Nylon:M4 BS EN 1021 1/2

- CERTIFICAT DE GARANTIE -

Partie à remplir par le Distributeur

Nom de l'utilisateur:.....

Prénom:.....

Adresse:.....

Code Postal : Ville :

Date de mise en service :

Modèle :

N° de série :

Réf. TIPS :

N° d'agrément :

Modèle :

N° de série :

Réf. TIPS :

N° d'agrément :

Cachet du Distributeur :

- VISITES D'ENTRETIEN -

Date de la visite :

Cachet du Distributeur :

Date de la visite :

Cachet du Distributeur :

Date de la visite :

Cachet du Distributeur :

Date de la visite :

Cachet du Distributeur :

Date de la visite :

Cachet du Distributeur :

Date de la visite :

Cachet du Distributeur :



Yes, you can.

Invacare® France Operations SAS Route de Saint Roch - 37230 FONDETTES



Invacare® Australia Pty Ltd.

1 Lenton Place, North Rocks NSW 2151 **Australia** ☎ (61) 2 8839 5333 **Fax** (61) 2 8839 5353

Invacare® n.v.

Autobaan 22 8210 Loppem (Brugge) **Belgium & Luxemburg** ☎ +32 (50) 831010 **Fax** +32 (50) 831011

Invacare® A/S

Sdr. Ringvej 37 2605 Brøndby **Danmark** ☎ (kundeservice) +45 - (0) 3690 0000 **Fax** (kundeservice) +45 - (0) 3690 0001

Invacare® Aquatec GmbH

Alemannenstraße 10, D-88316 Isny **Deutschland** ☎ +49 (0) 75 62 7 00 0 **Fax** +49 (0) 75 62 7 00 66

Invacare® European Distributor Organisation

Kleiststraße 49, D-32457 Porta Westfalica **Deutschland** ☎ +49 (0) 31 754 540 **Fax** +49 (0) 57 31 754 541

Invacare® SA

c/Areny s/n Poligon Industrial de Celrà 17460 Celrà (Girona) **España** ☎ +34 - (0) 972 - 49 32 00 **Fax** +34 - (0) 972 - 49 32 20

Invacare® Poirier SAS

Route de St Roch F-37230 Fondettes **France** ☎ +33 - (0) 2 47 62 64 66 **Fax** +33 - (0) 2 47 42 12 24

Invacare® Mecc San s.r.l.

Via dei Pini, 62 I-36016 Thiene (VI) **Italia** ☎ +39 - (0) 445-380059 **Fax** +39 - (0) 445-380034

Invacare® Ireland Ltd

Unit 5 Seatown Business Campus, Seatown Rd, Swords, County Dublin **Ireland** ☎ (353) 1 8107084 **Fax** (353) 1 8107085

Invacare® NZ

4 Westfield Place Mt. Wellington Auckland **New Zealand** ☎ (kundeservice) +64 - 22 57 95 10 **Fax** (kundeservice) +64 - 22 57 95 01

Invacare® AS

Grensesvingen 9 0603 Oslo **Norge** ☎ (kundeservice) +47 - 22 57 95 10 **Fax** (kundeservice) +47 - 22 57 95 01

Invacare® PORTUGAL Lda

Rua Estrada Velha, 949 4465-784 Leça do Balio **Portugal** ☎ +351-225105946 **Fax** +351-225105739

Invacare® AB

Fagerstagatan 9 163 91 Spånga **Sverige** ☎ (kundtjänst) +46 - (0) 8 761 70 90 **Fax** (kundtjänst) +46 - (0) 8 761 81 08

Invacare® B.V.

Celsiusstraat 46 NL-6716 BZ Ede **Nederland** ☎ +31 - (0) 318 - 69 57 57 **Fax** +31 - (0) 318 - 69 57 58

Invacare® Ltd

Pencoed Technology Park, Pencoed, Bridgend CF35 5HZ **United Kingdom**
☎ Customer service +44 - (0) 1656 - 776222 **Fax** +44 - (0) 1656 - 776220

FR

V2

1532967-FR
V2 06/2010